

ACCESSOIRES D'ASPIRATION



ACCESSOIRES D'ASPIRATION



Afin d'optimiser le système d'aspiration du point de captage jusqu'à l'aspiration, il est indispensable d'utiliser du matériel parfaitement étudié. Zubler vous propose une gamme complète d'accessoires vous garantissant un résultat optimal et un grand confort d'utilisation.

Bouche aspirante R1200

La bouche aspirante R1200 s'adapte aux canaux aux dimensions intérieures de 75 x 25 mm. Elle est extrêmement silencieuse et convient à pratiquement tous les travaux. La vitre de protection, disponible dans plusieurs tailles, se remplace très facilement grâce à sa fixation par deux vis.

Numéro d'article: 825/241



Bouche aspirante 1250

Avec sa vitre de protection rabattable, la bouche d'aspiration R1250 a été conçue spécifiquement pour des travaux de prothèse conjointe. Le filtre R1260 permet de récupérer les métaux précieux et il s'adapte facilement à la bouche aspirante R1250.

Numéro d'article: 825/236



Bouche aspirante R1251

Avec sa vitre de protection rabattable, la bouche d'aspiration R1251 a été conçue spécifiquement pour des travaux de prothèse conjointe. Le filtre R1260 permet de récupérer les métaux précieux et il s'adapte facilement à la bouche aspirante R1251. La vitre de protection, disponible dans plusieurs tailles, se remplace très facilement grâce à sa fixation par deux vis.

Numéro d'article: 825/2360



Filtre pour l'or R1260

Filtre pour l'or avec microtamis, compatible avec les bouches aspirantes R1250 et R1251. Insertion facile par le haut, capte l'alliage directement après l'aspiration.

Numéro d'article: 825/234



Entonnoir d'aspiration SH1

La bouche aspirante mobile SH1 peut être utilisée sur tout plan de travail, sans montage. Avec son socle lourd, pourvu d'une surface caoutchoutée antidérapante, elle peut être utilisée dans toutes les positions sur le plan de travail. La grande vitre de protection protège l'utilisateur des éclats produit par des disques ou des outils. Le tuyau d'aspiration en diamètre 36mm garantit une bonne efficacité de captage des poussières.)

Numéro d'article: 802/0035



Vitre de protection

Il existe 3 tailles de vitre de protection : petite 87 x 128 mm, moyenne 140 x 190 mm et grande 200 x 250 mm. 2 vis écartées de 44 mm garantissent la fixation à la cheville.

87 x 128 mm - Numéro d'article: 557/179

140 x 190 mm - Numéro d'article: 557/172

200 x 250 mm - Numéro d'article: 557/171



Canal R1000

Avec des dimensions intérieures de 75 x 25 mm et une longueur de 415 mm, le canal R1000 convient à de nombreux mobiliers dentaires courants. La géométrie particulière réduit les bruits occasionnés par les turbulences. Il est possible de raccorder au canal R1000 des tuyaux Ø 36 mm ou Ø 40 mm.

Numéro d'article: 570/065



Canal télescopique R1300

Avec des dimensions intérieures de 75 x 25 mm et une longueur de 426 mm, le canal R1300 télescopique convient à de nombreux mobiliers dentaires courants. Le canal R1300 peut être extrait de son logement de 110 mm et permet ainsi un travail devant le plan de travail. Il est possible de raccorder au canal R1300 des tuyaux Ø 36 mm ou Ø 40 mm.

Numéro d'article: 825/228



Canal sur mesure

Si nos canaux R1000 et R1300 ne correspondent pas à vos plans de travail, nous sommes en mesure de vous proposer des canaux sur mesure à partir d'une seule pièce.

R1000 S - Numéro d'article: 570/0657

R1300 S - Numéro d'article: 825/2285

Veuillez nous indiquer la longueur souhaitée de l'avant du canal jusqu'au milieu du raccordement du tuyau.



Silencieux rectangulaire R1100

Le silencieux rectangulaire R1100 est compatible avec les canaux aux dimensions intérieures de 75 x 25 mm et une longueur minimale de 415 mm. Le silencieux rectangulaire R1100 réduit les nuisances sonores immédiatement après la bouche d'aspiration.

Numéro d'article: 825/2615



Silencieux rond R1101

Le silencieux rond R1101 est compatible avec les tuyaux d'aspiration d'un diamètre intérieur de 36 et 40 mm. Le silencieux circulaire est installé directement dans le tuyau et réduit alors le bruit d'aspiration de manière significative.

Numéro d'article: 825/282



Cloche aspirante R1500

La manipulation des revêtements de coulée produit des poussières dangereuses pour la santé. Avec son bras flexible, la cloche aspirante R1500 peut être orientée dans n'importe quelle position sur le plan de travail en fonction de l'application (support mural en option).

Numéro d'article: 825/273


Numéro d'article: 570/2301 (support mural)



Grille monomère R1600, encastrée

La grille à monomère R1600 peut s'encastrer dans un plan de travail et crée ainsi un poste fixe de préparation et travail de la résine.

Numéro d'article: 825/230

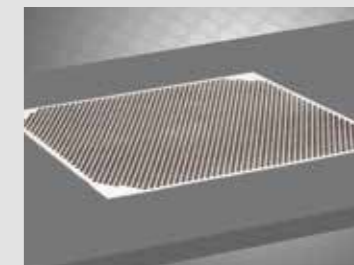

Grille monomère R1601, amovible

La grille monomère amovible R1601 peut être utilisée à différents postes de travail. Elle remplace très simplement une bouche d'aspiration R1200 ou R1250 en s'emboîtant dans un canal R1000 ou R1300.

Numéro d'article: 825/229



Décanteur de sable S1

Le pouvoir abrasif du sable endommage rapidement les réseaux PVC qui véhiculent les poussières - en particulier sur les aspirations centralisées.

C'est pourquoi il est recommandé d'installer un récupérateur de sable à la sortie des machines afin que celui-ci ne parte pas dans les canalisations.

Le décanter S1 est conçu pour le raccordement de 3 sableuses. Le sable abrasif usé peut être vidangé régulièrement dans un seau afin d'être éliminé.


Numéro d'article: 825/267



Décanteur de sable, petit modèle

Il fonctionne selon le même principe que le décanter S1, mais est conçu pour le raccordement d'une seule sableuse.

Numéro d'article: 825/2671

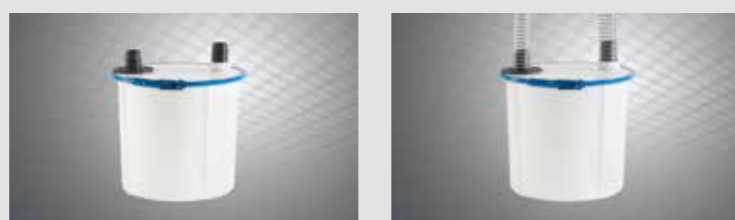

Tiroir de plan de travail R3000/R3002 avec panneau de commande

Dans la gamme des établis « Ergospace » Kavo, le module Zubler est simplement inséré à la place du tiroir d'aspiration Kavo et la bouche d'aspiration existante peut toujours être utilisée.

R3000 - Numéro d'article: 822/0650 compatible avec **AP600/AP601**

R3002 - Numéro d'article: 822/0652 pour **Z1**



Tiroir de plan de travail R3001 sans panneau de commande

Dans la gamme des établis « Ergospace » Kavo, le module Zubler est simplement inséré à la place du tiroir d'aspiration Kavo et la bouche d'aspiration existante peut toujours être utilisée.

R3001
- Numéro d'article: 822/0651



AP600 Module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour aspiration centralisée

L'AP600 est le module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour tous les micromoteurs courants. La sensibilité du déclenchement peut être mesurée automatiquement ou réglée manuellement. L'AP600 peut être utilisé pour tous les appareils de laboratoire jusqu'à 1000 W et représente ainsi la solution la plus flexible pour le poste de travail à aspirer.

Numéro d'article: 822/0600 pour **FZ VARIO**



AP600-A/AP601 Module d'ouverture automatique pour aspirations multipostes

L'AP600-A/AP601 est le module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour tous les micromoteurs courants. La sensibilité du déclenchement peut être mesurée automatiquement ou réglée manuellement. L'AP600-A/AP601 peut être utilisé pour tous les appareils de laboratoire jusqu'à 1000 W et représente ainsi la solution la plus flexible pour le poste de travail à aspirer.

AP600-A - Numéro d'article: 822/0611 pour **FZ1 & FZ2**

AP601 - Numéro d'article: 822/0610 pour **Z2**



AP600-R/AP601-R Module d'ouverture automatique pour machine outils CAM

L'AP600-R est le module d'ouverture automatique pour toutes les fraiseuses courantes avec une sortie de commutation en 24 volts. Veuillez toujours commander le câble d'interface approprié pour votre fraiseuse. Pour plus d'informations, consultez la liste à la page 9.

Numéro d'article: 822/0615



Panneau de commande déporté

VERSION COMPACTE

- Numéro d'article: 822/0641 pour **AP600 & AP600-A**

VERSION À INTÉGRER dans la façade de l'établi
- Numéro d'article: 822/0642 pour **AP600 & AP600-A**



Prise à poussière **ST02**

Sur demande, des prises à poussière sont installées dans les zones de laboratoire correspondantes. A l'aide de l'accessoire de nettoyage RS1/RS2, les sols et postes de travail peuvent être nettoyés très facilement. Compatible avec nos aspirations centralisées.

Numéro d'article: 825/2750



Prise à poussière **ST03**

La prise ST03 est équipée d'un contacteur qui permet le déclenchement de l'aspiration. Compatible avec les aspirations mono-poste équipée d'une prise dédiée et nos les aspirations multi-postes FZ1 et FZ2.

Numéro d'article: 825/2752



Kit de nettoyage **RS-1**

Le kit de nettoyage se compose d'un tuyau d'aspiration d'une longueur de 1,8 mètre, d'une brosse et d'un suceur à fente. Il est conçu pour le nettoyage des postes de travail et des zones autour des appareils.

Numéro d'article: 825/490



Kit de nettoyage **RS-2**

Le kit de nettoyage se compose d'un tuyau d'aspiration d'une longueur de 5 mètres, d'une brosse et d'un suceur à fente. Il est conçu pour le nettoyage du plancher et des postes de travail et des zones autour des appareils.

Numéro d'article: 825/497



Coupole spray **R1700**

La coupole R1700 est une coupole pour l'extraction des fines particules lors de la pulvérisation de spray sur vos modèles et la mise en place de vos opaques par spray.

Avec son design innovant cette coupole permet à l'utilisateur d'avoir une liberté de mouvement combiné à une aspiration très efficace. Raccordement du tube d'aspiration possible en Ø 36mm ou Ø 40 mm.

Numéro d'article: 825/223



CÂBLE D'INTERFACE POUR LES FRAISEUSES ET LES MICROMOTEURS

Câble KaVo pour raccordement

Micromoteur Kavo K-Control

Artikel Nr.: 825/256L

KaVo TLC Micromoteur

Artikel Nr.: 825/R56SL12



Câble Qube

pour raccordement

micromoteur Qube

Artikel Nr.: 825/25648



Câble 24V VHF

Connecteur rond 4 broches pour VHF

Artikel Nr.: 825/25610



Câble 24V VHF

Connecteur rond 6 broches pour VHF

Artikel Nr.: 825/25611



Câble 24V

Connecteur D-sub 9 broches pour Amann-Girrbach

Artikel Nr.: 825/25612



Câble 24V Roland

Prise jack

Pour Roland

Artikel Nr.: 825/25613



Câble ouvert

24 Volt ouvert à l'extrémité

Artikel Nr.: 825/25614



Connecteur

D-sub 15 broches pour Sirona

Artikel Nr.: 825/25615



Connecteur

D-sub 15 broches pour Imes Icore

Artikel Nr.: 825/25616



Connecteur

C-14

pour ZirkonZahn

Artikel Nr.: 825/2565L



TUYAU - TUBE AIR COMPRIME



Tube flexible gris

Diamètre intérieur 36 mm

Numéro d'article: 530/001



Tube air comprimé

Diamètre extérieur 8 mm

Numéro d'article: 530/301



Tube annelé

Diamètre intérieur 38 mm

Numéro d'article: 530/0112



Tube air comprimé

Diamètre extérieur 6 mm

Numéro d'article: 530/302



Tube annelé

Diamètre intérieur 40 mm

Numéro d'article: 530/004



Tube rejet d'air

Diamètre intérieur 76 mm

Numéro d'article: 530/0110



Tube annelé

Diamètre intérieur 50 mm

Numéro d'article: 530/0067



Adaptateur

Pour le raccordement de vos appareils à nos tuyaux d'aspiration courants



SAC FILTRE



Forts de la multitude d'applications de nos centrales d'aspiration, nous sommes en mesure de vous proposer une large gamme de sacs filtres, fabriqués à partir de matériaux divers et particulièrement adaptés à votre domaine d'application. Nos sacs filtres associés à nos aspirations performantes vous permettent de traiter tous types de poussières, y compris les plus nocives.

Sacs filtres

Pour aspiration
V4010 / V4011 / Z1-AT /
Z1-M10 und Z1-M11
Avec petites portes

Numéro d'article:
556/0035
(pack de 3)



Sacs filtres grande contenance

Pour aspiration
V4050 / V4051 / V4250 /
V4251 / Z1-M50 / Z1-M51

Numéro d'article:
556/0063
(À l'unité)
Numéro d'article:
556/0063P
(pack de 3)



Sacs filtres grande contenance

Pour aspiration
V6000 / V7000

Numéro d'article:
556/035C (À l'unité)
Numéro d'article:
556/035CP (pack de 3)



Sacs filtres grande contenance

Pour aspiration
Z1 ECO / Z1 CAM

Numéro d'article:
556/040 (À l'unité)
Numéro d'article:
556/040P (pack de 3)



CARTOUCHES FILTRANTES ET FILTRES FIN



Comme pour les sacs filtres, nous pouvons vous proposer des filtres fins adaptés aux domaines d'application les plus variés et fabriqués en différents matériaux.

Filtre fin

10 m² de surface filtrante.
Pour aspiration FZ10 / FZ20 / FZ30 / EF10




Filtre principal

Pour aspiration FZ2
Numéro d'article: 556/034



Filtre secondaire

Pour aspiration FZ2
Numéro d'article: 556/071

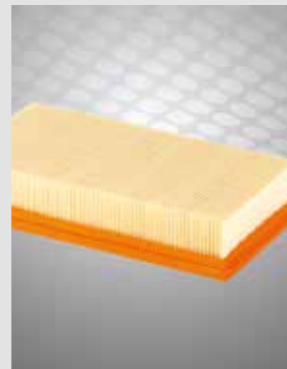

Filtre principal

Pour aspiration FZ1/FZ2
Numéro d'article: 556/038



Filtre secondaire

Pour aspiration FZ1/FZ2
Numéro d'article: 556/039



Filtre fin

Pour aspiration
V4000 / V5000 /
V6000 / V7000 / Z1 M
Numéro d'article: 556/019



Filtre fin

Pour aspiration
Z1 AT
Numéro d'article: 556/0034



Filtre fin

Pour aspiration
Z1 ECO / Z1 CAM
Numéro d'article: 556/0053



Filtre fin

Pour aspiration
Z1 ECO PRO / Z1 CAM PRO
Numéro d'article: 556/0054



Exhaust air filter diffusor

Suitable for suction systems
Z1 ECO / Z1 ECO PRO /
Z1 CAM / Z1 CAM PRO
Numéro d'article: 556/0055



Filtre de rejet d'air de classe 14 pour les poussières de classe H

Pour aspiration
Z1 ECO / Z1 ECO PRO
Z1 CAM / Z1 CAM PRO
Numéro d'article: 556/0052



Filtre à charbons actifs

Pour aspiration
V4000 / V5000 / Z1 M
Numéro d'article: 556/0041



Filtre à charbons actifs

Pour aspiration
Z1 AT
Numéro d'article: 556/004



Filtre à charbons actifs

Pour aspiration :
V6000 / V7000
Numéro d'article: 556/0046



Filtre à charbons actifs

Pour aspiration
Z1 ECO / Z1 ECO PRO
Z1 CAM / Z1 CAM PRO
Numéro d'article: 556/0051



Recharge charbons actifs

Pour aspiration
V4000 / V5000 / Z1 Mobile
Numéro d'article: 556/0042
Pour aspiration Z1 AT
Numéro d'article: 556/0043
Pour aspiration V6000 / V7000
Numéro d'article: 556/0049
Pour aspiration
Z1 ECO / Z1 ECO PRO
Z1 CAM / Z1 CAM PRO
Numéro d'article: 556/0056



Box de grattage AV1000

La préparation du modèle au sein du laboratoire est une étape importante mais comme beaucoup d'autres matériaux, le plâtre génère beaucoup de poussière au meulage, c'est pourquoi Zubler a conçu un box de grattage ergonomique et efficace. Une soufflette intégrée et commandée au pied permettant de nettoyer et refroidir les pièces sans sortir la main du box, la lumière du jour ou encore le bac à poussière amovible sont autant d'avantages qui placent le box de grattage Zubler en tête de la catégorie.

AV1000 - Numéro d'article: 825/311 avec franges de protection

AV1000 - Numéro d'article: 825/310 sans franges de protection

Vitre de protection avec franges - Numéro d'article: 825/322

FG1000 (base frame) - Numéro d'article: 825/324

Plaque de montage pour piètement - Numéro d'article: 825/323

Caractéristiques techniques:

AV1000

Dimensions en cm (L x H x P): 630 x 430 x 580 mm

Poids: 26 kg

Raccordement air comprimé requis: min. 3 bar

Eclairage

Le box de grattage est équipé de série d'un système d'éclairage à LED et permet ainsi d'obtenir un éclairage similaire à la lumière du jour.

Support pour fraises et pièces à usiner



Soufflette intégrée avec commande au pied



Bouche aspirante avec grande ouïes latérales



Universel

Convient à toutes les pièces à main habituelles.

Nettoyage facile

En basculant la glace de protection vers le haut et en retirant la cheville de son logement, il est très simple de sortir le bac à poussière pour le vider et le nettoyer

Piètement

Le piètement permet de fixer un boîtier de commande genou de micro-moteur



Box à résines monomères **MB1000**

De même conception que le box de grattage AV 1000, la société Zubler propose un box à résines monomères adapté à l'aspiration des vapeurs toxiques émanant du malaxage de résines monomères. Les vapeurs se déposent vers le bas du box et sont aspirées directement par l'aspiration à travers la grille. Il convient de noter qu'une aspiration avec filtre à charbon actif ou un système de rejet d'air vers l'extérieur doit être utilisé.

MB1000 - Numéro d'article: 825/315

FG1000 (piètement) - Numéro d'article: 825/324

Caractéristiques techniques:


MB1000

Dimensions en cm (L x H x P):

630 x 460 x 420 mm

Poids:

18 kg

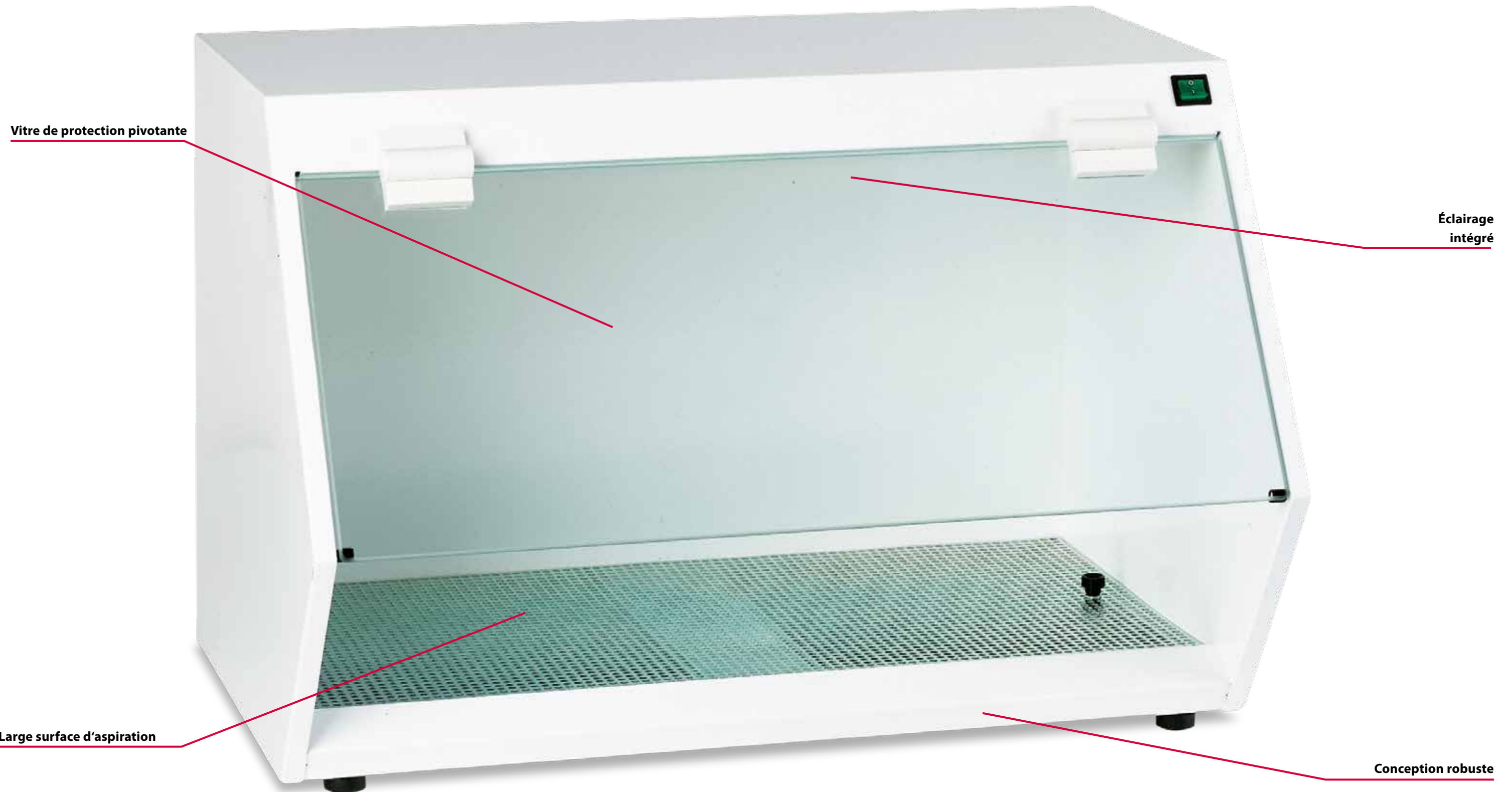

VARIOstar K50

Appareil à commande genou



Avec le nouvel appareil à commande genou VARIOstar K50, Zubler propose un appareil de commande convivial qui dispose de tous les éléments indispensables au travail quotidien du laboratoire dentaire:



VARIOstar T50

Unité de commande de table

Différents modèles:

804 - 3112 VARIOstar K50 Appareil à commande genou 230 V

Comprend:
804 - 3012 Appareil à commande genou 230 V
804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm



804 - 3152 VARIOstar T50 Appareil sur table avec pédale 230 V

Comprend:
804 - 3052 Appareil sur table T50 230 V
804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm
804 - 1016 Pédale



804 - 3162 VARIOstar T50 Appareil sur table avec pédale rotative gauche/droite 230 V

Comprend:
804 - 3052 Appareil sur table T50 230 V
804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm
804 - 1015 Pédale rotative



804 - 3172 VARIOstar T50 Appareil sur table avec variateur genou 230 V


Comprend:
804 - 3052 Appareil sur table T50 230 V
804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm
804 - 1017 variateur genou (à installer à gauche/à droite)



804 - 3002 VARIOstar Pièce à main

Comprend:
804 - 3002 Pièce à main avec pince de serrage Ø 2,35 mm



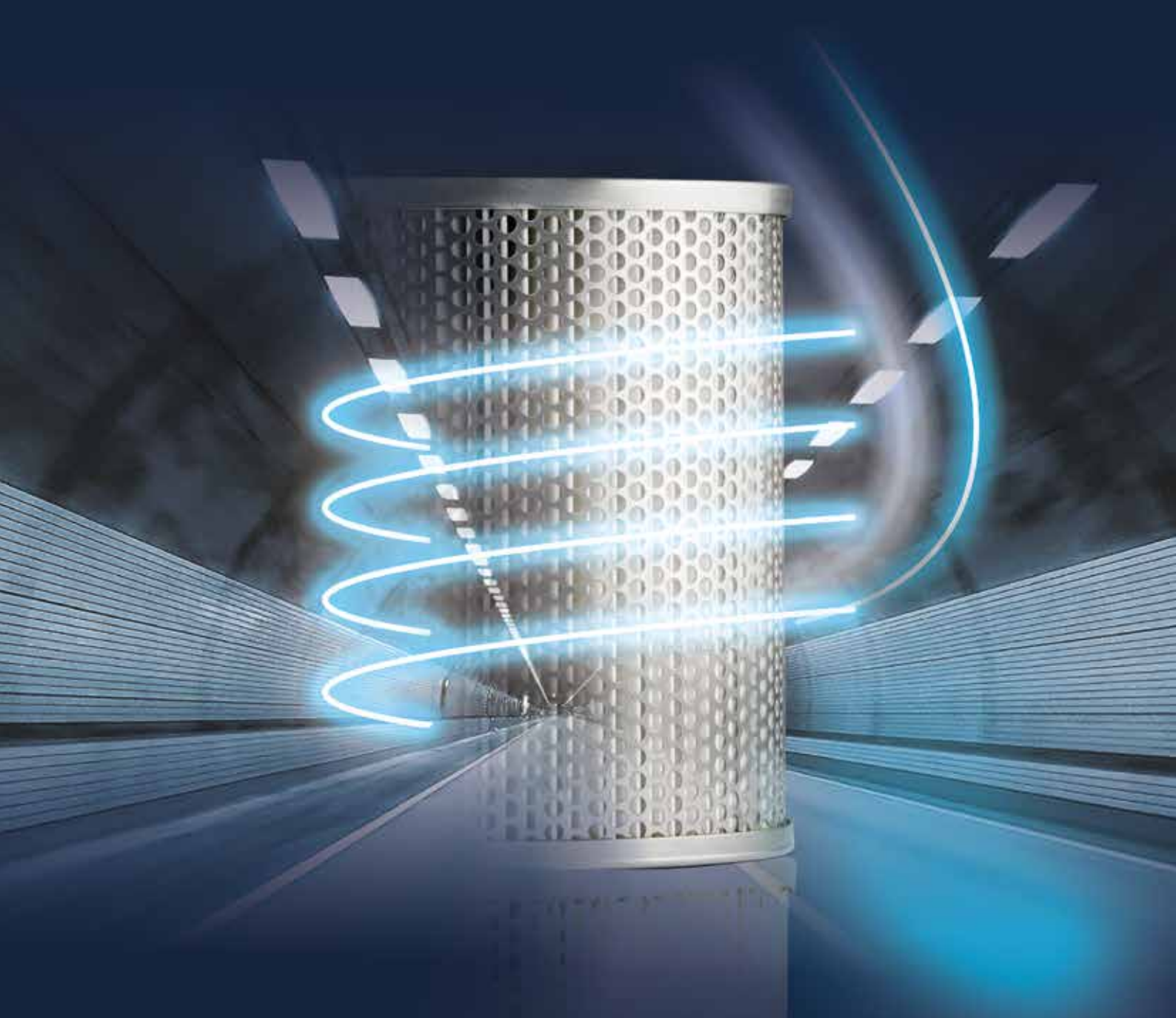


Zubler Gerätebau GmbH
Buchbrunnenweg 26
D - 89081 Ulm-Jungingen

Tel.: + 49 (0) 731 - 14 52 0
Fax: + 49 (0) 731 - 14 52 13
www.zubler.de

B00243 / 12-2022

CE

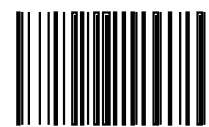

B00243

Distribué par:

Blank white rectangular area for distributor information.